


NewTest® THERMOMÈTRE INFRAROUGE



Manuel d'utilisation Référence : MDI907

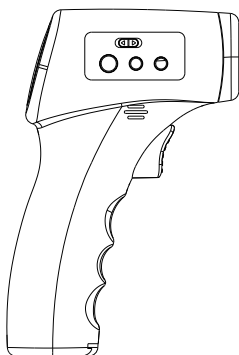

Remarque : une mauvaise utilisation peut provoquer un résultat inexact. La distance de mesure est de 1-3 cm du front, au centre.

Introduction

Merci d'avoir choisi le thermomètre infrarouge NewTest®

▲ Ce thermomètre utilise la technologie infrarouge pour mesurer la température instantanément et avec précision du corps ou d'un objet.

▲ Facile à utiliser et instantané, ce thermomètre n'a pas besoin d'être en contact avec le corps ou l'objet afin d'assurer une meilleure hygiène en étant plus pratique.

▲ Cet appareil mesure la température d'un corps ou un objet de 0 à 100°C. Il est donc possible de mesurer la température d'une surface comme la température :

- Du lait dans une bouteille
- Du bain du bébé
- De l'environnement

▲ L'alarme de fièvre sonne au-dessus de 37.5°C.

▲ Extinction automatique après 60 secondes d'inactivité.

2

Informations importantes de sécurité

▲ Afin d'utiliser le produit convenablement, lire et prendre connaissance des consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi.


Symboles normalisés	
Les symboles suivants peuvent apparaître sur le produit, la boîte ou dans ce manuel. Leur signification se trouve dans ce tableau	
	ATTENTION : Peut causer des problèmes majeurs. Consulter les documents d'accompagnements.
	MISE EN GARDE : Peut causer des problèmes mineurs. Consulter les documents d'accompagnement
	Pièces appliquées de type BF
	Fabricant
	Numéro de série
	Jeter conformément à la directive 2002/96/CE
	Courant direct
	Cartons et emballage papier à trier
	Manuel d'instructions
	Dispositif Médical
	Numéro de lot
	Garder au sec
	Maintenir à l'abri de la lumière et du soleil
	Limites de température
	Limites d'humidité

4


Composition du produit

- Structure

1. Ecran
2. Modes
3. Sonde
4. Plus bas (-)
5. Plus haut (+)
6. Paramétrage
7. Mesure
8. Cache piles

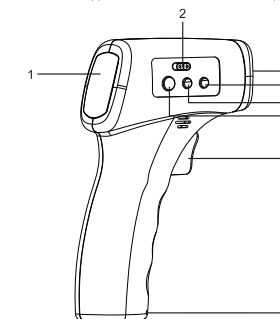

- Ecran

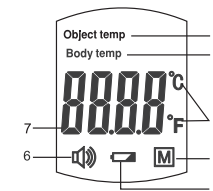

1. Indicateur de température d'une surface
2. Indicateur de température du corps
3. Unité
4. Dernière mesure prise
5. Indicateur de batterie faible
6. Indicateur sonore
7. Lecture de température

6

Index

Introduction	2
Informations importantes de sécurité	3
Composition du produit	6
Remplacement des piles	7
Paramétrage	8
Utilisation de l'appareil	9
Procédure de mesure	11
Messages d'erreur	12
Maintenance	13
Informations techniques	14
Garantie	15

1

Informations importantes de sécurité

▲ L'utilisation de ce thermomètre ne doit en aucun cas remplacer une consultation chez votre médecin. Suivre les instructions du médecin

▲ Les mesures de précaution habituelles doivent toujours être respectées, principalement lorsque l'appareil est utilisé pour un enfant

▲ Laisser l'appareil hors de portée des enfants

▲ Ne pas exposer le thermomètre sous la lumière directe du soleil pendant une longue période

▲ Ne pas toucher la lentille de mesure

▲ Ne pas modifier le produit

▲ Ne pas avaler les pièces annexes comme la pochette, les piles, le cache piles pour éviter l'étouffement

▲ Ne pas laisser le produit exposé à des solvants chimiques et ne pas laisser tomber ou faire subir de fortes vibrations ou impacts sur le thermomètre

▲ Ne tremper dans aucun liquide

▲ Ne pas laisser les piles dans le compartiment sans utilisation trop longtemps

▲ Retirer les piles du réceptacle si une utilisation n'est pas prévue pendant plus de 3 mois. Remplacer les piles si l'indicateur batterie faible s'affiche

▲ Le remplacement de piles neuves simultanément est recommandé

3

Informations importantes de sécurité

ATTENTION :
À la fin du cycle de vie du produit, ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères normales, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir des effets potentiellement nocifs sur l'environnement. Une élimination incorrecte peut provoquer une accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et le sol et peut être nocive pour la santé humaine.

CLASSIFICATION :

1. Appareil fonctionnant avec alimentation interne
2. Pièces appliquées de type BF
3. Protection contre la poussière et l'eau : IPX0
4. Non AP/APG
5. Opération : alimentation en continu

NOTE : L'utilisateur doit s'assurer que l'appareil fonctionne normalement et dans des conditions d'utilisation demandées avant utilisation.

5

Remplacement des piles

1. Retirer le cache-piles en suivant la flèche



2. Insérer 2x1.5V AAA piles alcalines



3. Refermer le cache-piles



Batterie faible et remplacement

Lorsque l'appareil est allumé, le symbole batterie faible (***) s'affiche à l'écran indiquant que les piles doivent être remplacées par des neuves pour éviter un dysfonctionnement.

Type de piles

Utiliser deux piles type AAA 1.5V alcalines.
Ne pas utiliser de piles expirées.
Retirer les piles si une utilisation n'est pas prévue pendant un long moment.

ATTENTION

Pour protéger l'environnement, jeter les piles usagées dans votre magasin de vente au détail ou dans les sites de collecte appropriés conformément aux réglementations nationales ou régionales.

7

Paramétrage

Ecran	Fonction	Description
	Sélection de l'unité de mesure	Changement d'unité °C à °F
	Activation / Désactivation du son	« OPEN » signifie que le son est activé « CLOS » signifie que le son est désactivé

8

Utilisation de l'appareil


Procédure

Pour mesurer la température du corps

1- Sélectionnez sur le thermomètre le mode « Body ». L'unité de température clignote (Voir Schéma 1).

2- Alignez la sonde du thermomètre sur le milieu du front pour mesurer la température du corps (au-dessus des sourcils) et la positionner à 1 cm de la peau (Voir Schéma 2).

3- Appuyez sur le bouton « Mesure ». Vous entendez alors 3 bips brefs et le résultat avec la température s'affiche immédiatement. Il est recommandé de prendre la température 3 fois. Si ces 3 mesures sont différentes, prendre la température la plus haute.

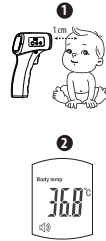

Fonction d'indication de rétroéclairage tricolore

Ce thermomètre est conçu avec une fonction de rétroéclairage tricolore pour indiquer la température. Les couleurs changent selon le résultat :

Écart de température °C	Écart de température °F	Couleur de l'indicateur	Alarme
32,0°C ≤ T < 37,5°C	89,6°C ≤ T < 99,5°F	VERT	Non
37,5°C ≤ T < 38,5°C	99,5°C ≤ T < 101,3°F	ORANGE	Oui
T ≥ 38,5°C	T ≥ 101,3°F	ROUGE	Oui

Le résultat de la prise de température peut être altéré par la transpiration, l'huile ou autre produit appliqué sur la peau. La température de la peau du bébé réagit rapidement aux événements extérieurs. Ainsi, ne pas prendre la température pendant/après l'allaitement. Le thermomètre s'éteindra automatiquement après 60 secondes d'inactivité.

10

Messages d'erreur

Indications d'erreur

Les symboles suivants s'afficheront à l'écran lors d'un résultat anormal

Symbole	Correction
	En mode Body, la température mesurée est au-dessus de 43°C/109,4°F Couleur de l'indicateur rouge
	En mode Body, la température mesurée est au-dessous de 32°C/89,6°F Couleur de l'indicateur rouge
	En mode Surface, la température mesurée est au-dessus de 100°C/212,0°F ou la température ambiante est au-dessus de 40,0°C/104,0°F Couleur de l'indicateur rouge
	En mode Surface, la température mesurée est au-dessous de 0,0°C/32,0°F ou la température ambiante est au-dessous de 5,0°C/41,0°F Couleur de l'indicateur rouge
	Batterie faible, remplacer les piles par des neuves
ERR	Le thermomètre subit des interférences électromagnétiques

12

Informations techniques

Description	Thermomètre infrarouge frontal sans contact
Ecran	LCD rétroéclairé
Intervalle de mesure	Mode Body 32,0°C~43,0°C (89,6°F~109,4°F) ; Mode Surface 0,0°C~100,0°C (32,0°F~212,0°F)
Unité de température	°C/°F
Résolution d'affichage	0,1°C/0,1°F
Précision de mesure (dans des conditions de laboratoire)	±0,2°C/0,4°F 35,0°C~42°C (95,0°F~107,6°F) ; ±0,3°C/0,5°F 34,0°C~35,4°C (93,2°F~95,7°F) et 42,1°C~42,9°C (107,8°F~109,2°F)
Mémoire	Affichage de la dernière mesure prise
Source d'alimentation	2*AAA piles alcaline
Arrêt automatique	Après 60 secondes
Poids	Approx. 95g (sans piles)
Dimensions	95mm*45mm*155mm
Autonomie	500 mesures
Accessoires	Manuel d'utilisation et pochette de transport
Environnement d'utilisation	Mode Body 10,0°C~40,0°C (50,0°F~104,0°F) Mode Surface 5,0°C~40,0°C (41,0°F~104,0°F)
Environnement de stockage	Température : -20°C~+55°C (-4,0°F~+131,0°F) Humidité : RH≤85% Ne pas placer le thermomètre dans un endroit exposé aux éclaboussures, aux températures élevées, à l'humidité, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à la corrosion

14

Utilisation de l'appareil

Pré-mesure

La température de la zone du front et des tempes est différente de la température interne, prise par voie orale ou rectale. Le mode de mesure frontale affiche la température corporelle en positionnant l'appareil face au front. S'assurer de la propreté de la lentille de mesure et de son bon état, que le front est propre sans transpiration, cosmétiques, coupures etc.

Avant la prise de mesure, s'assurer que la personne mesurée n'a pas pris de bain chaud ou fait d'exercices physiques pendant les 30 dernières minutes.

Pour prendre la température, vous devez être dans un espace intérieur à la température ambiante stable pendant au moins 5 minutes et vous tenir à l'écart d'un ventilateur, de bouches d'air conditionné, de radiateurs, cheminées, etc... La lentille du thermomètre doit être propre. Utilisez un chiffon sec pour la nettoyer.

Tableau *1 Température normale du corps selon ma zone mesurée

Position de mesure	Température normale(°C)	Température normale(°F)
Anal	36,6-38,0	97,9-100,4
Oral	35,5-37,5	95,9-99,5
Aisselle	34,7-37,3	94,5-99,1
Oreille	35,5-37,8	95,9-100
Front	35,8-38,0	96,4-100,4
Âge	Température normale(°C)	Température normale(°F)
0-2 ans	36,4-38,0	97,5-100,4
3-10 ans	36,1-37,8	97,0-100,0
11-65 ans	35,9-37,6	96,6-99,7
>65 ans	35,8-37,5	96,4-99,5

REMARQUE : La température normale est différente entre les différentes parties du corps. Pour définir la votre, mesurez votre température pendant au moins 2 semaines, à la même position du front et à la même heure.

9

Procédure de mesure

Température d'un objet

1. Sélectionner le mode Surface, l'unité de mesure clignote

2. Positionner la sonde face à 1-3 cm de la surface plane de l'objet.

Appuyer sur le bouton « Mesure »

3. Le résultat s'affiche à l'écran accompagné de 3 bips succinets



Note :

La mesure de la température d'un objet peut être affectée par l'environnement, le résultat est donné à titre indicatif.

A moins de 1cm de la surface, le résultat de mesure ne peut être garanti.

L'appareil s'éteindra automatiquement après 60 secondes d'inactivité.



11

Maintenance

Préservation de l'appareil

- Conserver l'appareil dans un endroit à l'abri de l'humidité
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser de matière abrasive
- Conserver à l'abri des projections de liquides

Maintenance

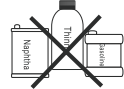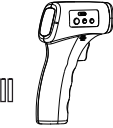Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits d'entretien toxiques.	Placer l'appareil dans un endroit sec et propre. Ne pas exposer l'appareil aux températures extrêmes chaudes ou froides
	
Retirer les piles de leur compartiment en cas de non utilisation pendant plus de 3 mois.	Ne pas utiliser l'appareil à proximité de champs électromagnétiques (téléphones mobiles, micro-ondes...)
	

Note : Aucune prise en charge sous garantie ne sera possible dans le cas de non application de ces instructions

13

Garantie

- Une garantie de un an est comprise après l'achat de ce produit
- La maintenance gratuite ne sera pas assurée dans ces circonstances :
 - Les dommages causés par le démontage ou le remontage sans autorisation.
 - La panne, les dommages causés par un rangement inapproprié ou les dommages causés par le démantèlement ou la chute
 - Les dommages causés par le manque d'entretien
 - La panne causée par la manipulation sans suivre les instructions du manuel.
 - Les dommages causés par la réparation incorrecte d'un magasin non autorisé par la société
- Des frais seront facturés pour tout service de réparation au-delà de la garantie.
- Apporter le produit au point de vente avec l'emballage fourni et le reçu d'achat chez votre pharmacien en cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie

ShenZhen Medek Bio-Medical Co., Ltd.
Add: No.101 Wenhao Industrial Park, No.13 Yuanxin Road,
Tongle Community, Baolong Street, Longgang District,
518100 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP Name: Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importé par : **Smart Agents SAS**
34 Boulevard des Italiens
75009 PARIS - France

Distribué par : **EvoluPlus**
Rue Irène Caron - ZI
60390 AUNEUIL - FRANCE

La date de fabrication se trouve sur l'étui.
Référence production : MDEVP07ITM



15